

OMRON**Manual de Instruções****Escova Dental Elétrica OMRON****HT-B223-W**

All for Healthcare 0-00-9290-002

Obrigado por adquirir a Escova Dental Elétrica OMRON HT-B223-W.

- Leia este manual de instruções antes de usar.
- Por favor, guarde este manual de instruções para referência futura.
- As ilustrações utilizadas neste manual podem diferir ligeiramente do aparelho em si.
- Este aparelho não foi projetado para cuidados médicos ou tratamento médico.

1. Informações de segurança importantes

Leia as informações de segurança importantes neste manual de instruções antes de utilizar este aparelho.

Siga este manual de instruções cuidadosamente para sua segurança.

ALERTA

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

- Consulte o seu dentista se tiver síndrome de sensibilidade bucal.
- Consulte o dentista em casos de cirurgia bucal ou periodontal recente, ou em caso de tratamento de outros sintomas orais (tratamento de algum dente, prótese solta).
- Consulte o seu dentista em casos de sangramento contínuo ou grave das gengivas após o uso deste aparelho.
- Mantenha este aparelho fora do alcance de crianças em geral para impedir ingestão acidental. Caso esta ocorra, consulte o médico imediatamente.
- Crianças devem ser supervisionadas para assegurar o uso correto do aparelho.
- NÃO utilize este aparelho em crianças com menos de 3 anos de idade.
- NÃO compartilhe a cabeça da escova com terceiros.
- NÃO utilize este aparelho a menos de 10 cm de aparelhos médicos implantáveis, como marca-passo ou outros dispositivos elétricos implantados
- NÃO permita que a unidade principal entre em contato com a água ou outros líquidos.

CUIDADO

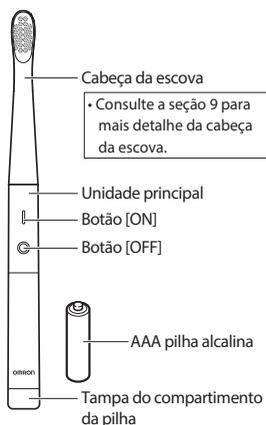
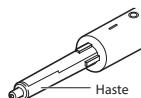
Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em lesão leve ou moderada ao usuário ou paciente, ou causar danos ao equipamento ou outras propriedades.

- NÃO insira as pilhas com suas polaridades alinhadas incorretamente.
- Remova as pilhas se este aparelho não for utilizado por um longo período de tempo.

- No caso de contato do fluido das pilhas com os olhos, enxague imediatamente com água abundante. Consulte seu médico imediatamente.
- NÃO pressione a escova de dentes com força excessiva contra os dentes ou as gengivas, ou os toque com as partes plásticas diferentes das cerdas. Evite escovar a mesma área por muito tempo.
- Aprovada apenas para uso humano.
- NÃO derrube ou sujeite a unidade principal a forte impactos.
- NÃO utilize este aparelho em pessoas que não conseguem se expressar.
- NÃO desmonte ou modifique o aparelho.

Nota

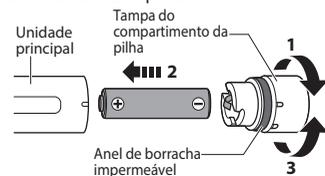
- NÃO utilize este aparelho para qualquer outro fim que não escovar os dentes.
- NÃO utilize cremes dentais do tipo abrasivo, caso utilize creme dental. Consulte o seu dentista antes de usar cremes dentais do tipo abrasivo que removem manchas de cigarros ou clareiem os dentes. Isto pode causar danos aos dentes ou nas gengivas.
- NÃO danifique nem aplique força excessiva na haste.

2. Conheça seu aparelho

Consulte a seção 9 para mais detalhes da cabeça da escova.

3. Instalação da pilha

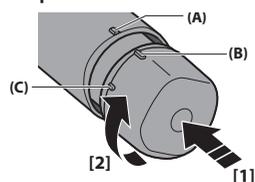
Seque as mãos e a unidade principal antes de inserir a pilha.



1 Gire a tampa do compartimento da pilha para removê-la.

2 Insira a pilha.

- Insira a pilha corretamente com as polaridades + e - conforme mostrado.
- Use apenas pilhas alcalinas AAA.
 - Descarte as pilhas usadas segundo a legislação local.
 - Não retire a tampa do compartimento da pilha à prova d'água para prevenir a deterioração do desempenho. Pode causar dano ou mau funcionamento do dispositivo.

3 Gire a tampa do compartimento da pilha para fechar.

[1] Insira a tampa na unidade principal para alinhar a parte saliente da unidade principal (A) com a parte saliente da tampa (B: mais longa).

[2] Gire a tampa para alinhar a parte saliente da tampa (C: mais curta) com a parte de saliente da unidade principal (A).

- Aperte a tampa para evitar a entrada de água dentro da unidade principal, caso contrário poderá provocar o mau funcionamento.
- Não gire a tampa com força. Pode causar danos ao dispositivo.

Tempo de operação contínua

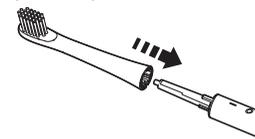
- Este dispositivo pode ser usado aproximadamente por 2,5 meses com uma pilha alcalina AAA (com base no uso por 2 minutos, duas vezes ao dia, sob a temperatura ambiente de 23°C).
- A vida da pilha depende do modelo da pilha, tempo de uso, força aplicada durante a escovação, e outros fatores. Substitua a pilha quando a oscilação da escova perder a força.
- As pilhas fornecidas podem ter uma vida útil reduzida em relação às pilhas novas.

4. Fixe a cabeça da escova

1 Fixe a cabeça da escova na unidade principal.

Insira a cabeça da escova na unidade principal, como mostrado até ouvir um clique. Não insira a cabeça da escova obliquamente ou girando. Pode causar danos à unidade principal ou à cabeça da escova.

Coloque a cerda para cima

**5. Uso do aparelho**

1 Coloque a cabeça da escova em sua boca.

Para impedir respingos de creme dental ou água, ligue o aparelho após colocar a cabeça da escova em sua boca.

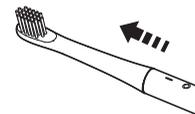
2 Pressione o botão [ON] para ligar a escova.

- A cabeça da escova começa a vibrar. Aplique a cabeça da escova nos seus dentes ou gengiva suavemente e faça movimentos horizontais.
- Você sentirá uma forte vibração ao utilizar este aparelho pela primeira vez. Isto é causado pela oscilação sônica, que é exclusiva das escovas de dentes elétricas sônicas.
- A duração de utilização recomendada é de 2 minutos por sessão.

3 Pressione o botão [OFF] para desligar.

6. Após o uso

1 Puxe a cabeça da escova em linha reta para removê-la da unidade principal.



2 Lave a cabeça da escova com água.

3 Lave a unidade principal com água. Não lave a unidade principal quando a tampa do compartimento da pilha estiver solta ou aberta.

4 Seque água e guarde o aparelho. Seque a cabeça da escova e a unidade principal com um pano macio e guarde o aparelho em um local bem ventilado.

Nota

Troca a cabeça da escova pelo menos a cada 3 meses ou assim que estiver desgastada.

7. Manutenção**7.1 Limpeza**

- Mantenha a cabeça da escova e a unidade principal limpas.
- Não deixe resíduos de creme dental na unidade principal. Caso contrário, pode resultar na deterioração da superfície da unidade principal.
- Limpe as manchas com um pano macio. Para manchas pesadas, use o pano macio umedecido com água ou detergente suave (neutro) para limpar a unidade principal e, em seguida, seque com um pano seco.
- Não deixe entrar água na unidade principal.
- Não mergulhe ou lave a unidade principal em água.
- Não mergulhe a cabeça da escova ou a unidade principal em álcool, nem higienize com água quente (40 °C ou acima).
- Não limpe com pano embebido com antisséptico.
- Não utilize gasolina, diluidores ou solventes semelhantes para remover as manchas.

7.2 Armazenamento

- Não armazene o aparelho:
 - Em locais onde são facilmente molhados.
 - Em locais expostos a temperaturas extremas, umidade, luz solar direta, poeira ou vapores corrosivos, como de alvejantes.
 - Em locais expostos a vibrações ou impactos.
- Guarde em locais fora do alcance de bebês e crianças.

8. Resolução de problemas

Problema	Possível causa / solução
A vibração da cabeça da escova é instável.	A cabeça da escova não foi montada corretamente à unidade principal. ▶Montar corretamente a cabeça da escova na unidade principal. Consulte a seção 4.
A vibração da cabeça da escova está fraca.	A pilha está esgotada. ▶Substitua a pilha. Consulte a seção 3.
O aparelho não liga.	A pilha está esgotada. ▶Substitua a pilha. Consulte a seção 3. A polaridade da pilha não está devidamente alinhada. ▶Verifique a instalação da pilha se está colocada corretamente. Consulte a seção 3.
A unidade principal esquenta.	A unidade principal pode aquecer-se ligeiramente devido às propriedades deste aparelho. ▶Isso não é mau funcionamento e não afeta o período de vida útil do aparelho.
A gengiva sangra. Dor na gengiva por causa da forte vibração.	Você poderá ter um sangramento da gengiva nos primeiros dias. ▶Geralmente, o sangramento vai parar em poucos dias. Se tiver sangramento, pare de utilizar este aparelho e consulte o seu dentista.

Se as medidas acima não forem efetivas, entre em contato com o SAC da OMRON Healthcare Brasil.

9. Especificações técnicas

Nome do aparelho	Escova de Dentes Elétrica OMRON
Modelo	HT-B223-W
Alimentação	1 pilha alcalina AAA (DC 1,5 V)
Consumo de energia	Aproximadamente 0,2 W
Vida útil da pilha	Aproximadamente 2,5 meses (nas seguintes condições: usando 1 pilha alcalina AAA, por 2 minutos, duas vezes por dia com temperatura ambiente de 23 ° C.)
Frequência de vibração	Aprox. 18000 vezes/minuto
Condições de funcionamento	+ 5 ° C a +35 ° C / 30 a 85 % UR
Condições de armazenamento	-20 ° C a + 60 ° C / 10 a 95 % RH
Peso	Unidade principal: aprox. 36 g (incluindo cabeça da escova e pilha)
Dimensões	Unidade principal: aprox.194,5mm (A) (incluindo a cabeça da escova) × 15,6 mm (L) × 15,9 mm (P)

Material	Acrilonitrila butadieno estireno/elastômero termoplástico/nylon/polibutileno tereftalato /polipropileno/dióxido de manganês/carbono/zinco/hidróxido de potássio
Conteúdo	Unidade principal, 1 cabeça da escova, 1 pilha alcalina AAA, manual de instrução.

Nota

- Estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este aparelho não é perecível.

Cabeça da escova
Refil para Escova Dental Elétrica OMRON SB-172
• A cabeça da escova é composta por com 3 tipos de cerdas: espiral, lisa e afilada.
• Rigidez das cerdas: Média

- Consulte o dentista sobre o tipo de escova de dentes.

10. Acessório opcional

- Refil para Escova Dental Elétrica OMRON SB-172

11. Descarte e reciclagem do aparelho e pilhas

- O descarte do dispositivo, componentes, acessórios, pilha e embalagem devem ser de acordo com as normas locais vigentes. O descarte ilegal pode causar danos ao meio ambiente. Disponha cada item presente na embalagem da forma correta, como a seguir:

Item	Destino
Dispositivos componentes e acessórios	Serviços autorizados ou OMRON Healthcare Brasil
Pilhas	Lojas, serviços autorizados e pontos de coleta
Embalagem (cartões, sacolas e outros componentes plásticos e manuais de instrução)	Pontos de coleta especializados

- Todo e qualquer custo envolvido com transporte, com os pontos de coleta ou a centrais de serviço são de responsabilidade do consumidor.



12. Garantia

Sua Escova Dental Elétrica OMRON HT-B223-W, excluindo a pilha, é garantida em relação à defeitos de materiais e de mão de obra que apareçam dentro do período de garantia da seguinte forma: Unidade principal: 90 dias.

Este período é válido a partir da data de compra, quando usado de acordo com as instruções fornecidas com este aparelho. A garantia será invalidada quando defeitos/danos ocorrerem devido ao mau uso ou vazamento da pilha.

A garantia citada acima é somente para o consumidor final que compra o dispositivo no varejo. A reparação ou substituição deste aparelho, coberta pela garantia descrita acima, será realizada sem quaisquer custos, caso seja decidido pela OMRON Healthcare Brasil. O reparo ou a substituição é de nossa responsabilidade e a única solução prevista de acordo com a garantia acima. Utilize apenas peças específicas fornecidas pela OMRON Healthcare para este aparelho. O uso de outras peças não fornecidas pela OMRON Healthcare poderá causar danos ou o mau funcionamento deste aparelho. Eventuais danos causados devido ao uso de peças inapropriadas serão de responsabilidade do consumidor, e a cobertura de garantia deste aparelho não poderá ser aplicada.

Siga sempre as instruções de utilização, limpeza e armazenamento descritas neste manual. Se for verificado o uso inconsistente com as instruções dadas neste manual, a cobertura da garantia não poderá ser aplicada.

Se este aparelho necessitar de assistência, entre em contato com o SAC da OMRON Healthcare Brasil.

ESTE DOCUMENTO É A ÚNICA GARANTIA FORNECIDA PELA OMRON EM CONJUNTO COM ESTE DISPOSITIVO, E A OMRON SE DECLARA ISENTA DE QUALQUER OUTRA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUSIVE AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO PARA FINS DETERMINADOS. AS GARANTIAS IMPLÍCITAS E OUTROS TERMOS QUE POSSAM SER IMPOSTOS POR LEI, SE HOVER, SÃO LIMITADOS AO TERMINO DO PERÍODO DE GARANTIA EXPRESSO ACIMA.

A GARANTIA ACIMA É COMPLETA E EXCLUSIVA. O GARANTIDOR EXIME-SE EXPRESSAMENTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS CASUAIS, ESPECIAIS OU DECORRENTES DE QUALQUER NATUREZA (ALGUNS PAÍSES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE DANOS CASUAIS OU DECORRENTES, PORTANTO, A GARANTIA ACIMA PODE NÃO SE APLICAR AO SEU CASO).

Esta garantia confere direitos legais específicos; você também poderá ter outros direitos que variam de acordo com a jurisdição. Devido às exigências locais especiais, algumas limitações e exclusões acima não poderão ser aplicadas no seu caso.

Para assegurar a garantia: Aos clientes que registrarem seu dispositivo junto a OMRON, nossa empresa manterá o compromisso da garantia de 90 dias, mesmo em caso da perda da fatura. O registro poderá ser feito assim que você entrar em contato com o SAC ou no site www.omronbrasil.com.

ATENÇÃO: Em qualquer um dos casos, todos os campos do cadastro devem ser preenchidos corretamente; para isso, tenha em mãos a(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) no momento do cadastro. O(s) cadastro(s) deve(m) ser efetuado(s) no prazo máximo de até 90 dias da data de emissão da nota fiscal do aparelho.

Importado e distribuído no Brasil por:
Omron Healthcare Brasil Indústria e Comércio de Produtos Médicos Ltda.
CNPJ: 10.345.462/0001-02
Av Ain Ata (Lot M II P I Logístico), 370
Lote 12 - Quadra B - Jardim Ermida I
Jundiaí/SP - CEP: 13.212-213
Autorização ANVISA : 4.00.781-1
(produto não perecível)
Vida útil: 3 anos

SAC da OMRON Healthcare Brasil
Grande São Paulo e telefones móveis:
(11) 2336-8044
Demais regiões brasileiras: 0800 771 6907
sac@omronbrasil.com
www.omronbrasil.com

© 2020 OMRON HEALTHCARE, INC.

Fabricado na China
Cód. Rev. Data
IM-HT-B223-W - 02 - 10/2020